

## Di-Printer 操作概要

- Data Integrity対応プリントソフトウェア -

2019/3

誰が、いつ、どのプリンタで、何部、出力したかがわかるソリューションです。  
印刷機能の利用は無料で、どなたでも御利用いただけます。

## 印刷機能




①ログイン




⑧回収

自動的に操作ログを取得しています。

②PDFファイル選択

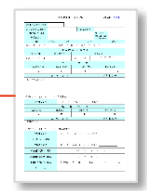

③プリンタ選択  
④印刷部数入力

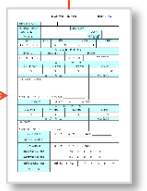

⑤任意事項入力  
⑥印刷コメント  
⑦印刷

### ■自動印刷項目

- ・印刷日時 | 時刻サーバより
- ・印刷プリンタ名称 (ポート)
- ・印刷者 (本名アプリログイン者)
- ・印刷SEQNO | 年度+月+SEQ8桁 (設定変更可能)
- ・印刷SEQNO内のSEQ/総印刷部数
- ・上記SEQNO+ページ番号のバーコード
- ・ページ番号/総ページ番号

### ■任意印刷項目

- ・承認者氏名
- ・配布先名 | 部数分
- ・フリー項目 | 右上/右下/左上/左下
- ⑤必要事項入力は上記の項目になります。

⑥印刷コメントは訂正用  
に出力した場合などその  
利用用途などをコメント  
して記録できます。

印刷場所の変更はオプションになります。

## ■印刷例

2018/04/04 (水) 17:04:57 | Sharp PX-S7050(192.168.0.222) フィラー太郎  
2018040000011 (3/5) 配布先: 大阪工場製造1課  
承認者: フィラー花子

試験指図書・試験記録 (様式4)						
試験記録番号	指図年月日	平成	年	月	日	指図者
製品標準書整理番号				製造記録番号		
一般的名称(販売名)				ロット番号		
製造業者名						
検体採取						
検体採取年月日	検体採取者	採取場所、採取方法		採取量		
試験検査結果						
試験環境	温度:		湿度:			
試験項目	規格	試験結果	適否	試験実施年月日	試験実施者	
			適否	平成 年 月 日 平成 年 月 日		
			適否	平成 年 月 日 平成 年 月 日		
			適否	平成 年 月 日 平成 年 月 日		
外観検査 (法定表示)			適否	平成 年 月 日 平成 年 月 日		
他の試験検査機関を利用した試験項目						
試験検査機関名称						

ロット番号: Lot1010
Page. 1 / 100

・上記SEQNOのバーコード

配布した印刷物を回収する際に  
スキャンすると、その回収履歴が記録され、どのあと何部戻ってきていないかがわかります。任意入力 of 配布先が入力されていれば、戻って来ていない配布先もわかります。

・印刷SEQNO | 年度+月+SEQ8桁  
・印刷SEQNO内のSEQ/総印刷部数

2018040000011  
2018年04月の00000011番目の出力作業  
ということがわかります。  
(連番の接頭辞は設定によって固定文字列  
を追加することも可能です)

(3/5)  
総出力部数5の内の3出力目の印刷物です。

・フリー項目 | 右上/右下/左上/左下

任意の項目を各ページの右上/右下/左上/  
左下に出力することができます。

### ■印刷例

2018/04/04 (水) 17:04:57 | Sharp PX-S7050(192.168.0.222) フィラー太郎  
2018040000011 (3/5) 配布先: 大阪工場製造1課  
承認者: フィラー花子

試験指図書・試験記録 (様式4)

試験記録番号	指図年月日	平成 年 月 日	指図者
製品標準書整理番号	製造記録番号		
一般的名称(販売名)	ロット番号		
製造業者名			
検体採取			
検体採取年月日	検体採取者	採取場所、採取方法	採取量
試験検査結果			
試験環境	温度:	湿度:	
試験項目	規格	試験結果	適否
			適 否
			適 否
			適 否
外観検査 (法定表示)			適 否
他の試験検査機関を利用した試験項目			

ロット番号: Lot1010 Page. 1 / 100

・印刷日時  
・印刷プリンタ名称 (ポート)  
・印刷者 (本名アプリログイン者)

印刷の履歴になります。  
印刷者は本アプリの認証を経て印刷を実施していますので、  
なりすましなどは出来ません。

・配布部門

任意項目の配布部門を印刷します。  
印刷の部毎に印字内容が変わります。

・承認者氏名

任意項目の承認者を印刷します。

本色文字は追加で印字する部分  
注) プリントアウトは黒字で出力されます。

### 凡例

自動印刷項目

任意印刷項目

・ページ番号/総ページ番号

印刷部数1つのうちのページ番号を出力し  
ます。

Di-Printer

PCにインストールしたアプリケーションを実行し  
ユーザーID / パスワード でログインします  
ActiveDirectory による認証も可能です

日本語 Eng

## Di-Printer

ユーザーID

パスワード

ログイン

  
フィラーシステムズ株式会社



The screenshot shows the 'Di-Printer' application window. At the top, there is a file path: `E:¥GMP Document¥GMP.pdf`. To the right of the path is a button with three dots, highlighted by a red square. Below the path is a section titled '付加情報' (Additional Information) with several fields: '承認 宗次郎', '製造部第1製造G, 製造部第2製造G', '印刷テスト', '社外秘', 'フィルターシステムズ', and 'Di-Printer'. Below this is '使用期限日\*' (Expiration Date) set to '2019/09/20' with a '3ヶ月' (3 months) duration. The '印刷設定' (Print Settings) section includes a page count of '2' (with a note '(配布先数と部数は一致すること)'), 'Di-Printer' as the printer name, 'EPSONCB2565 (PX-S7050 Series)' as the printer model, '片面印刷' (Single-sided printing) for two-sided printing, and 'カラー' (Color) selected for the color mode. A blue '印刷' (Print) button is at the bottom.

印刷対象のPDFを選択します  
または  
エクスプローラーからPDF  
ファイルをドラッグ&ドロップ  
します

Di-Printer

E:¥GMP Document¥GMP.pdf

付加情報

承認 宗次郎

製造部第1製造G,製造部第2製造G (配布先が複数の場合はカンマで区切る)

印刷テスト

社外秘

フィルターシステムズ

Di-Printer

使用期限日\* 2019/09/20 3ヶ月

印刷設定

2 (配布先数と部数は一致すること)

Di-Printer

プリンター EPSONCB2565 (PX-S7050 Series)

両面印刷 片面印刷

カラー  カラー  グレースケール

印刷

必須項目を入力します

Di-Printer

E:¥GMP Document¥GMP.pdf

付加情報

承認 宗次郎

製造部第1製造G, 製造部第2製造G (配布先が複数の場合はカンマで区切る)

印刷テスト

社外秘

フィルターシステムズ

Di-Printer

使用期限日\* 2019/09/20 3ヶ月

印刷設定

Di-Printer

プリンター EPSONCB2565 (PX-S7050 Series)

両面印刷 片面印刷

カラー  カラー  グレースケール

印刷

必要があれば任意項目を入力  
します



Di-Printer

E:¥GMP Document¥GMP.pdf

付加情報

承認 宗次郎

製造部第1製造G,製造部第2製造G (配布先が複数の場合はカンマで区切る)

印刷テスト

社外秘

フィルターシステムズ

出力先のプリンターを選択します  
デフォルトは「通常使うプリンター」です  
次回ログイン時にはここで使用したプリンターがデフォルトに設定されます

Di-Printer

プリンター EPSONCB2565 (PX-S7050 Series)

両面印刷 片面印刷

カラー  カラー  グレースケール

印刷

Di-Printer

E:¥GMP Document¥GMP.pdf

付加情報

承認 宗次郎

製造部第1製造G,製造部第2製造G (配布先が複数の場合はカンマで区切る)

印刷テスト

社外秘

フィルターシステムズ

Di-Printer

使用期限日\* 2019/09/20 3ヶ月

印刷設定


2 (配布先数と部数は一致すること)

Di-Printer

プリンター EPSONCB2565 (PX-S7050 Series)

印刷ボタンをクリックすると印刷が実行されます


印刷

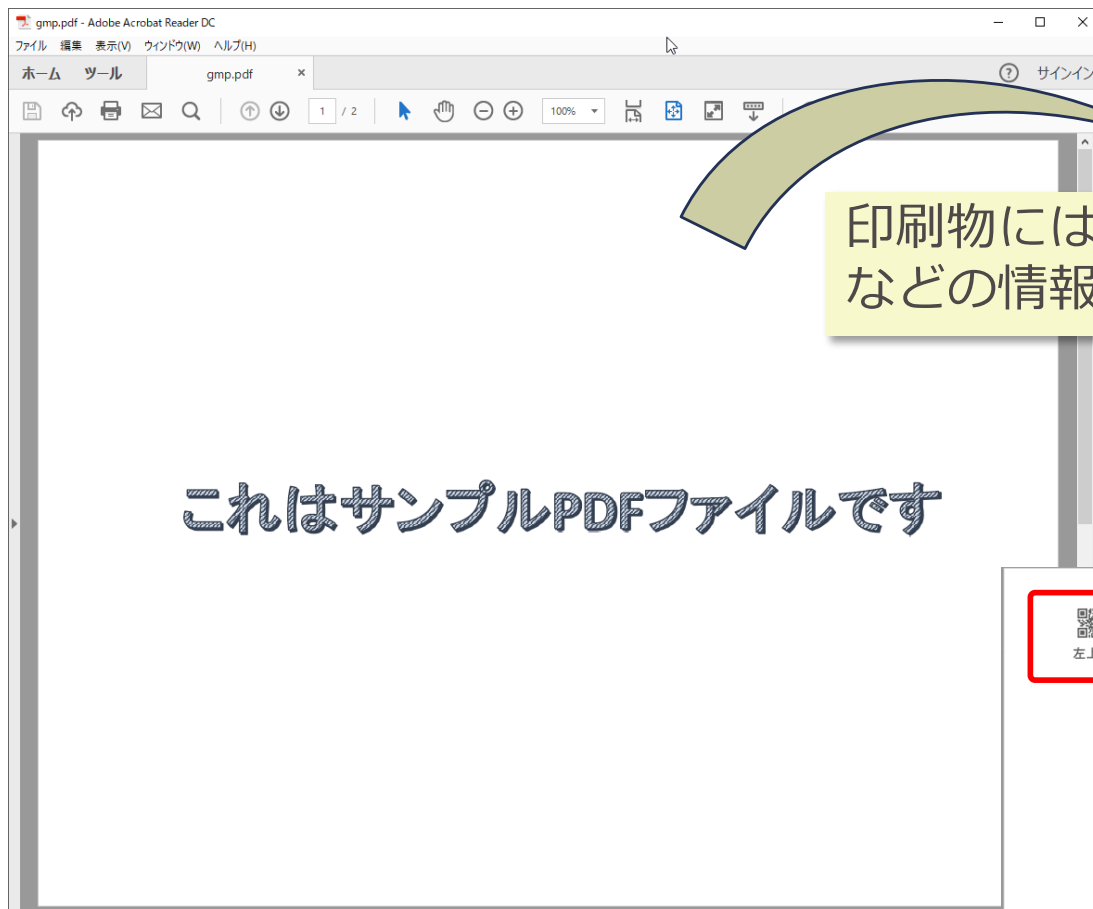

印刷元PDF

印刷物には 印刷日時、プリンタ、印刷者、管理番号  
などの情報が各ページに印字されます

印刷物

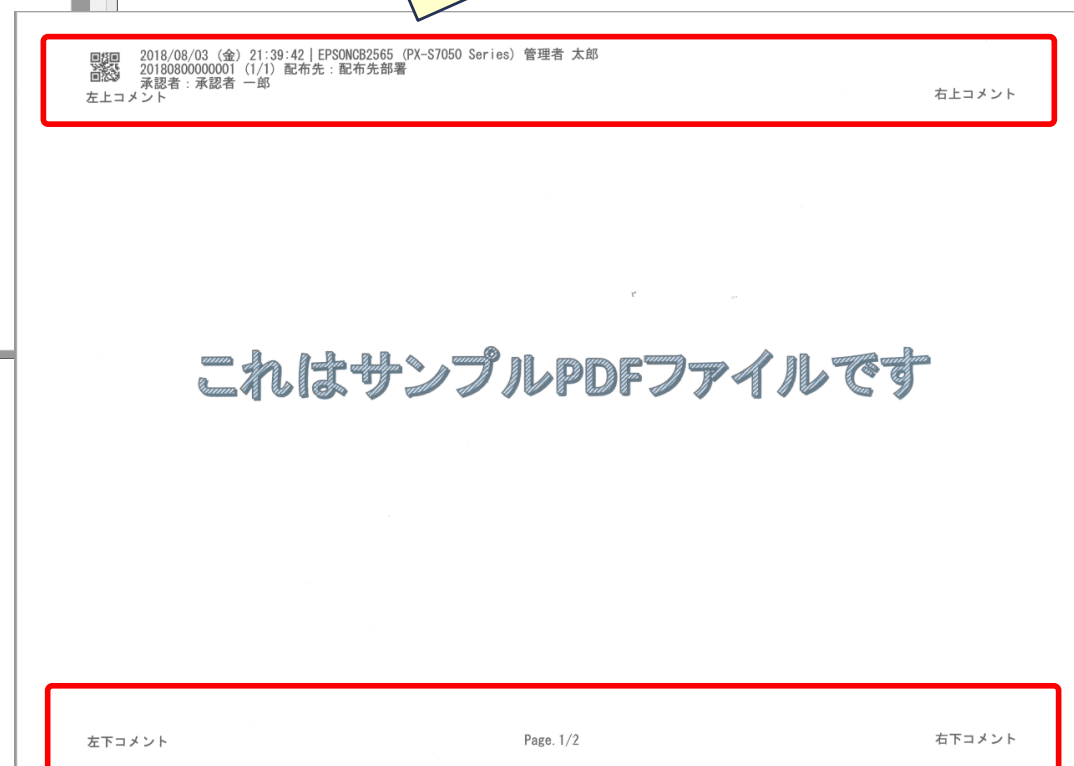

これはサンプルPDFファイルです

Di-Printer
- □ ×

回収状況を検索する条件を入力し  
検索ボタンから検索を実行します

回収処理

検索条件

---

印刷日時  ~

印刷SEQNO  ~

プリンタ名

ユーザー名

承認者氏名

配布先名

印刷コメント

使用期限日  ~

回収済み印刷を含む

検索

デフォルトでは未回収の文書を対象に検索を行います  
[回収済み印刷を含む]をチェックすると 回収済みの印刷も  
検索されます

Di-Printer
— □ ×

◀

回収処理

表示行数 20 ▾
⏪ |◀ 1-20 / 2 ▶ |⏩

回収	印刷SEQNO	印刷日時	配布先名	使用期限日	回収頁数/総頁数	未回収頁番号
未	<a href="#">20190600000001(2/2)</a>	2019/06/20 16:31:26	製造部第2製造G	2019/09/20	0/4	1,2,3,4
完	<a href="#">20190600000001(1/2)</a>	2019/06/20 16:31:26	製造部第1製造G	2019/09/20	4/4	

現在の回収状況が表示されます

画面右上の [回収処理]ボタンから 回収処理画面に遷移します  
回収処理画面では ページ毎の回収を登録できます

Di-Printer

<

20190600000001(1/2) ページ 回収

回収日時	印刷SEQNO	ページ番号	回収者
2019/06/20 17:25:54	20190600000001(1/2)	1	回収 陽子
2019/06/20 17:25:55	20190600000001(1/2)	2	回収 陽子
2019/06/20 17:25:56	20190600000001(1/2)	3	回収 陽子
2019/06/20 17:25:59	20190600000001(1/2)	4	回収 陽子

回収した印刷の 印刷SEQNO と ページ番号を入力し、[回収]ボタンで一覧に追加します  
QRコードを読み取って印刷SEQNO と ページ番号を入力することも可能です

[登録]ボタンで一覧表示された回収を登録します

登録

JP | [EN](#)

**監査証跡を確認する対象を選択します**

Di-Printer

<

検索条件

対象事業  印刷  回収  ユーザー

印刷対象PDFファイル \_\_\_\_\_

印刷日時 \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

ユーザー名 \_\_\_\_\_

印刷SEQNO \_\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_\_

プリンタ名 \_\_\_\_\_

承認者氏名 \_\_\_\_\_

配布先名 \_\_\_\_\_

印刷コメント \_\_\_\_\_

[検索](#)

Di-Printer

検索条件

対象事業  印刷  回収  ユーザー

印刷対象PDFファイル \_\_\_\_\_

印刷日時 \_\_\_\_\_  \_\_ : \_\_ : \_\_ ~ \_\_\_\_\_  \_\_ : \_\_ : \_\_

ユーザー名 \_\_\_\_\_

印刷SEQNO \_\_\_\_\_ ~ \_\_\_\_\_

プリンタ名 \_\_\_\_\_

承認者氏名 \_\_\_\_\_

配布先名 \_\_\_\_\_

印刷コメント \_\_\_\_\_

検索条件を入力して [検索]ボタンをクリックします



検索条件に該当するログが監査証跡として一覧表示されます

Di-Printer

表示行数 20 1-20 / 2

印刷SEQNO	印刷日時	使用期限日	ファイル名	プリンタ名	ユーザー名	総頁数	承認者氏名	配布先名	印刷部数	右上	右下	左上	左下	印刷コメント
20190600000001(2/2)	2019/06/20 16:31:26	2019/09/20	GMP.pdf	EPSONCB2565 (PX-S7050 Series)	印刷 圭一郎	4	承認 宗次郎	製造部第2製造G	2	印刷テスト	社外秘	フィラーシステムズ	Di-Printer	印刷テストです
20190600000001(1/2)	2019/06/20 16:31:26	2019/09/20	GMP.pdf	EPSONCB2565 (PX-S7050 Series)	印刷 圭一郎	4	承認 宗次郎	製造部第1製造G	2	印刷テスト	社外秘	フィラーシステムズ	Di-Printer	印刷テストです

[出力]ボタンから 一覧の内容をCSVファイルへ保存できます



Di-Printer

## 環境設定画面で設定を変更できます

Di-Printer設定

ユーザー認証

ActiveDirectory

ユーザー登録

サーバー

ドメイン名

時刻サーバ

ntp.jst.mfeed.ad.jp

期首月

4月

シーケンス番号 接頭辞 (\$Y:年度 \$M:月 'TEXT':固定文字列)

\$Y\$M

パスワードポリシー

- パスワードは6桁以上であること
- パスワードに1つ以上の数字を含むこと
- パスワードに1つ以上のアルファベットを含むこと
- パスワードは以下の回数まで再利用できないこと  
5回
- パスワードの有効期限を3ヶ月とする
- パスワードを3回間違えた場合アカウントロック
- 5分間操作がない場合は自動で終了する

QRコード表示位置

左  右

登録

ユーザー登録

パスワードポリシー

QRコードの印刷位置設定

印刷シーケンス番号の接頭辞を設定可能です

\$Y = 年度 (4桁) \$M = 月(2桁)  
'文字列' = シングルクォーテーション内の文字列を  
固定で付与  
(例)  
\$Y'-\$M'-SiteA-'  
-> 2019-03-SiteA-00000001